


## 吸入指導チェック報告書(ディスク)

患者ID: \_\_\_\_\_  
 患者氏名: \_\_\_\_\_  
 担当医師名: \_\_\_\_\_

薬局名: \_\_\_\_\_  
 店名: \_\_\_\_\_  
 指導薬剤師名: \_\_\_\_\_

用法用量:(朝: 昼: 夕: 眠前: )吸入 1回の使用可能回数(60吸入 / 28吸入)  
**【 アドエア・フルタイド・セレベント 】**

	指導日		
①薬の効果を説明	/	/	/
②用法用量を説明	/	/	/
③カウンターの確認・ 使用可能回数説明	/	/	/

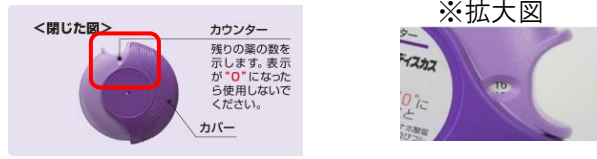

<吸入手順> (注意点)

④吸入手順	カチッと音がするまでカバーを開ける		
⑤薬のセット	カチッと音がするまでレバーを押す 以降は器具を水平に保つ		
⑥息吐き	吸入口に息を吹きかけないようにして、 苦しくない程度に息を吐く		
⑦薬の吸入	<b>速く深く</b> 吸い込む (わずかな甘味・粉を感じる)		
⑧息止め	苦しくない程度にできるだけ長く止める(5秒程度)		
⑨息吐き	鼻からゆっくりと息を吐き出す		
⑩もう一度⑥～⑨を計2回以上繰り返す。(甘味・粉を感じなくなるまで)			
⑪カバーを閉じる	カチッと音がするまで閉じるレバーには触らない		
⑫1回2吸入以上の場合は④～⑪を繰り返す			
⑬うがい	ガラガラ・ブクブクうがいを各3回ほど行う セレベントは必ず必要ではない		

⑬保管・お手入れの説明	水洗いや、湿ったもので拭いたりしない		
	確認者名		

◎正しくできる    ○できているが再確認必要    △できていない

※補助資材



ディスクス練習器



トレーナー

特記事項