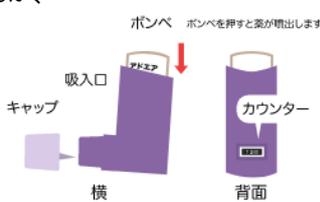
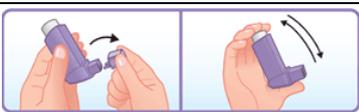


## 吸入指導チェック報告書(エアゾール)

患者 ID:	薬 局 名:
患者氏名:	店 名:
担当医師名:	指導薬剤師名:

用法用量:(朝: 昼: 夕: 眠前: )吸入 1回の使用可能回数(60吸入 / 28吸入)  
**【 アドエア ・ フルティフォーム 】**

		指導日	/	/	/
①薬の効果を説明					
②用法用量を説明					
③使用可能回数、交換日を説明 	使用可能回数を超えてもガスは出るが、徐々に薬は含まれなくなる。 アドエアはカウンター付 フルティフォームは吸入残量によりカウンターの背景色が変わる カウンターが赤になったら次の吸入器を準備する				
<初回準備> (注意点)					
④空噴霧		4回空噴霧を行う フルティフォーム:3日以上使用しなかった場合に4回空噴霧 アドエア:1週間以上使用しなかった場合に2回空噴霧			
<吸入手順> (注意点)					
⑤吸入器を振る		ガスと薬が均一に混ざるようしっかり振る 			
⑥息吐き		苦しくない程度に息を吐く			
⑦吸入器をくわえる		吸入口を軽く歯で噛んで、噛んだ歯の隙間から空気も入るようにくわえる			
⑧薬の吸入		息を吸い始めると同時に1回ボンベを押して、 <b>ゆっくり深く(3秒程度)吸い込む</b> 			
⑨息止め		苦しくない程度に <b>できるだけ長く止める(5秒程度)</b>			
⑩息吐き		鼻からゆっくりと息を吐き出す			
⑪1回2吸入以上の場合は⑤～⑩を繰り返す。					
⑫うがい		ガラガラ・ブクブクうがいを各3回ほど行う			
⑬保管・お手入れの説明		ボンベに水をかけない			
		確認者名			

◎正しくできる    ○できているが再確認必要    △できていない

※補助資材



特記事項